

---

**Notice**



**SOMNI PÔLE**

*" L'énergie magnétique est l'énergie élémentaire  
dont dépend la vie de tout organisme<sup>1</sup> "*

---

---

<sup>1</sup> Professeur W. Heisenberg, Prix Nobel de  
Physique 1932

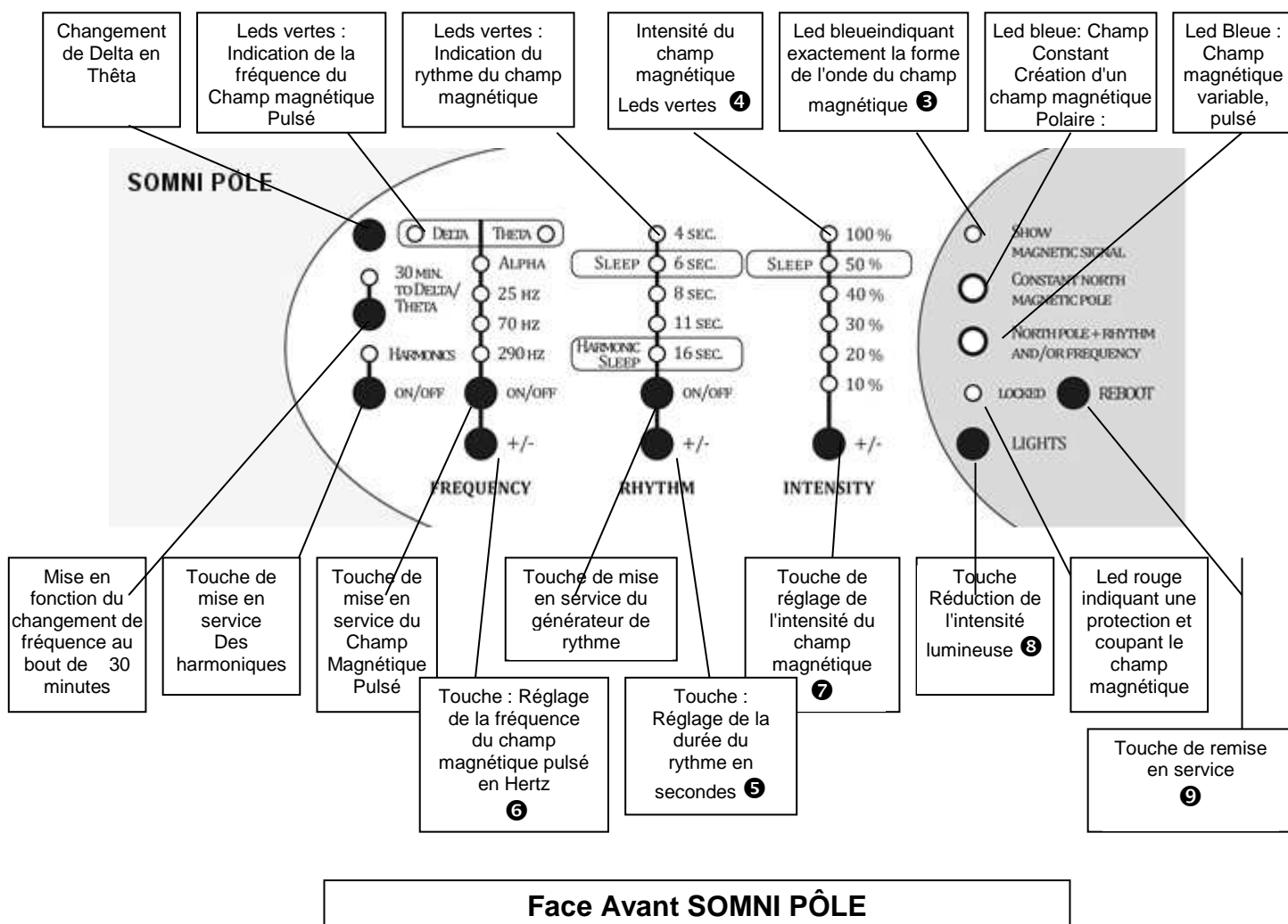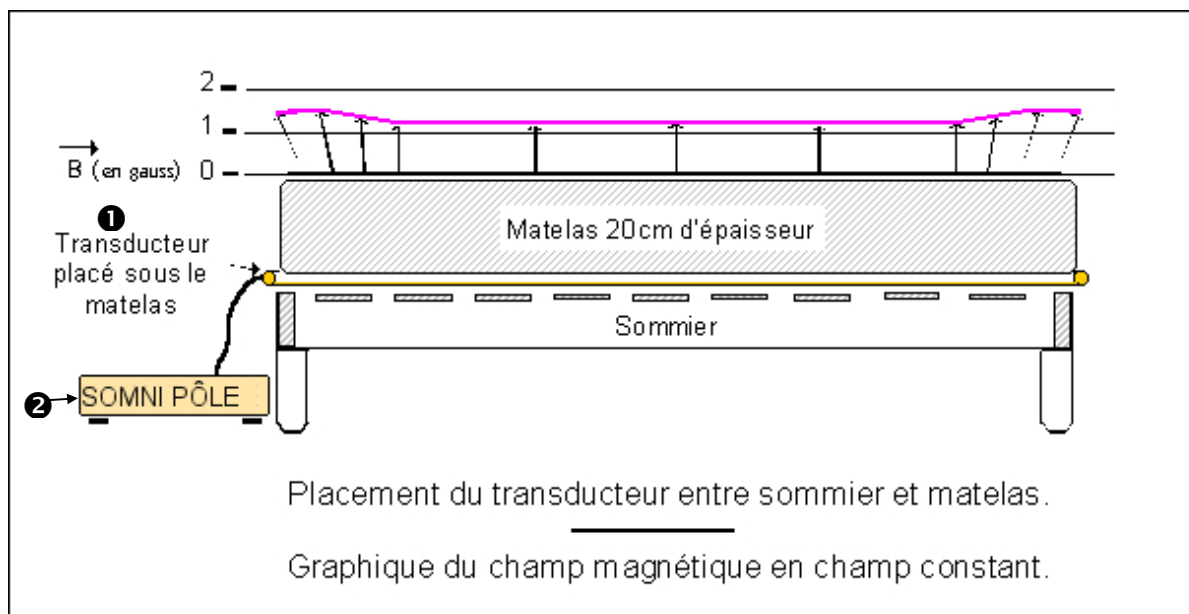

**Cher client,**



Lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et respecter les conseils y figurant. Conserver ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure ou pour un éventuel repreneur de votre matériel.

### Utilisation conforme

Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil **SOMNI PÔLE** (Brevets INPI : FR2888983, FR2948226, FR2948227 ; Brevet Européen : EP2454742 ; Brevet international : WO2011007060 ; Brevet Inde : 1108/DELNP/2012).

Ne pas l'entreposer à l'extérieur.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent le bon fonctionnement de l'appareil.

Toute utilisation sortant du cadre donné est considérée comme non conforme. Le constructeur décline toute responsabilité pour des dommages en résultant, seul l'utilisateur en assume le risque.

### Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

### Les contre-indications

L'utilisation de L'appareil **SOMNI PÔLE** est contre-indiquée pour les personnes portant un appareil électro-médical implanté (**stimulateur cardiaque, neurostimulateur, etc...**) ou ayant subi une **greffe** ainsi que pour les **femmes enceintes**.

## CONSIGNES DE SECURITE

### Précautions concernant l'utilisation

Ne réparer jamais l'appareil **SOMNI PÔLE** vous-même : le retrait de la carrosserie vous expose à des risques de décharges électriques ou d'autre nature. Contacter toujours un technicien qualifié.

Eteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

En cas d'orage, il est conseillé de déconnecter la prise secteur pour éviter tout endommagement de l'appareil.



#### **Raccordement électrique**

L'appareil doit être raccordé uniquement au courant alternatif. Le socle mural doit être équipé d'une prise de terre. La tension doit être identique avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, c'est à dire 230 Volts (120 Volts pour USA).



#### **Risque de choc électrique**

Ne jamais saisir la fiche secteur ou la prise de courant avec des mains humides.

Ne pas débrancher la fiche en tirant le câble d'alimentation.

Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.

Pour éviter des accidents électriques il est recommandé d'utiliser des prises de courant comprenant, placé en amont, un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit (le courant de déclenchement nominal maximal est de 30 mA).

### **Précautions concernant l'installation**

Placez le boîtier **SOMNI PÔLE** sur une surface stable et horizontale, afin d'éviter des chutes qui pourraient blesser des personnes ou endommager le produit.



Conserver un espace libre suffisant autour du boîtier **SOMNI PÔLE** pour assurer une bonne ventilation.

**Ne pas poser d'objets sur l'appareil et ne pas boucher les orifices d'aération.**

Avec un réglage du champ magnétique à 100%, il est normal que les parois de **SOMNI PÔLE** chauffent car le régulateur interne dissipe de l'énergie afin de stabiliser cette puissance.

Eviter que l'appareil n'entre en contact avec des liquides ou de la vapeur. Ne pas l'installer à proximité de sources de chaleur ou dans des lieux poussiéreux.

Eloigner de quelques dizaines de centimètres le transducteur d'autres dispositifs électroniques pouvant générer des interférences (appareil de radio, de télévision, etc.).

Les conditions ambiantes idéales prévoient une température de 5°C à 30°C et un taux d'humidité entre 15% et 85%.

## **SOMNI PÔLE**

La première fonction de l'appareil **SOMNI PÔLE** est destinée à créer un champ magnétique d'intensité constante (champ statique), champ sensiblement égal à celui du Pôle Nord magnétique et d'orientation verticale (90°) sur l'ensemble du lit.

L'utilisateur dort comme s'il était placé sur le Pôle Nord magnétique. **L'orientation NORD / SUD du lit** n'est plus nécessaire.

La deuxième fonction de l'appareil **SOMNI PÔLE** est destinée à créer un champ magnétique variable avec une fréquence équivalente à celle des ondes DELTA (en plus avec ses harmoniques ALPHA, THETA, SIGMA dans l'option "harmoniques").

Ces ondes DELTA sont générées par le cerveau durant les périodes III et IV du Sommeil Lent Profond.

Au bout d'une heure d'utilisation, le champ magnétique redevient automatiquement CONSTANT, l'utilisateur dort alors comme s'il était placé sur le Pôle Nord magnétique.

La troisième fonction de **SOMNI PÔLE** est de créer un Champ Magnétique Pulsé à différentes fréquences.

Les fréquences de ce champ sont réglables (avec leurs harmoniques dans l'option "harmoniques").

Au bout d'une heure d'utilisation, le champ magnétique redevient automatiquement CONSTANT.

## MISE EN SERVICE

### Description de l'appareil

Contrôler le matériel lors du déballage pour constater des accessoires manquants ou des dommages. Si des dégâts dus au transport sont constatés, il faut les notifier au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les trois jours suivant la livraison, avec copie adressée à Studio Adam, conformément à l'article L. 133-3 du code de commerce,.

Remarque : Voir page 2 pour les illustrations d'utilisation et les éléments de l'appareil.

PACK 1 : NPP100	PACK 2 : NPP200
1 Boîtier <b>SOMNI PÔLE</b> : SA9000	1 Equivalent au Pack 1
2 Transducteur magnétique Drap : TRP100	2 Transducteur magnétique Coussin: TRS200
3 Boussole : NOT400	PACK 3 : NPP300
4 Notice : NOT400	1 Equivalent au Pack 2,
	2 TRT304 remplace TRS200



L'appareil SA9000 comporte 5 colonnes d'indicateurs et de commandes.

Sur la colonne la plus à droite, **3 Leds** indiquent l'état de fonctionnement de **SOMNI PÔLE** :

- SHOW MAGNETIC SIGNAL
- CONSTANT NORTH MAGNETIC POLE
- NORTH POLE + RHYTHM AND/OR FREQUENCY

Si la touche **FREQUENCY** est appuyée, la touche en haut à gauche permet de passer de **DELTA** à **THETA** et une autre touche "**30 MIN. TO DELTA/THETA**" permet également de passer automatiquement de la **fréquence sélectionnée** à la **fréquence DELTA ou THETA**, au bout de 30 minutes d'utilisation.

Une touche "**HARMONICS**" permet de mettre en fonctionnement les harmoniques .

### Mise en service

➔ Pour créer le Pôle Magnétique Nord sur le lit : placer le Transducteur Drap TRP100 sur le sommier, le matelas venant le recouvrir (**étiquette placée sur le dessus**).

Illustration ①

➔ Raccorder ce transducteur sur la prise de sortie du boîtier **SOMNI PÔLE** SA9000. Brancher la prise secteur et mettre l'appareil en marche au moyen de l'interrupteur MARCHE / ARRET situé sur la face arrière.

Illustration ②

➔ Désactiver les touches **FREQUENCY** et **RHYTHM** (boutons en position relevée). Le voyant SHOW MAGNETIC SIGNAL (Led bleue) est alors allumé, ce qui indique que le champ magnétique est constant. Ce voyant indique l'état du champ magnétique produit. Il reste dans ce cas allumé (champ constant en intensité).

Illustration ③

L'indicateur INTENSITY du champ magnétique (Led verte) indique 100%, soit le champ magnétique maximum.

Illustration ④

➔ Grâce à la boussole placée à l'extérieur de la surface du matelas, contrôler le champ magnétique **tout autour de la bordure supérieure du lit**.

Si l'aiguille de la boussole dévie au nord vers l'intérieur du lit, alors le pôle magnétique créé au dessus du lit est un pôle Nord.

Si l'aiguille de la boussole dévie au sud vers l'intérieur du lit, alors le pôle magnétique créé au dessus du lit est un pôle Sud.

→ Si l'on désire changer le sens du champ magnétique, il suffit d'inverser le sens du branchement du transducteur sur la prise de sortie. Si besoin est, intervertir la couleur des 2 fiches en inversant leurs manchons plastiques.

**Dans l'hémisphère Nord**, l'utilisation normale de SOMNI PÔLE est **un pôle Nord au dessus du lit** (côté du transducteur ayant l'étiquette).

## UTILISATION DE SOMNI PÔLE

La valeur du champ magnétique terrestre au pôle Nord est de **0.63 Gauss** et l'inclinaison est de 90°, soit verticale.

La valeur du champ magnétique terrestre à **Paris** est sensiblement **0.47 Gauss** et son inclinaison est de 64°30'.

Sa composante verticale a pour valeur **0.41 Gauss**, la composante horizontale vaut **0.20 Gauss**.

A **New York**, la composante verticale vaut **0.47 Gauss**, la composante horizontale vaut **0.20 Gauss**.

A New Delhi, la composante verticale vaut **0.19 Gauss**, la composante horizontale vaut **0.38 Gauss**.

La valeur du champ magnétique terrestre sur l'équateur géomagnétique est de **0.31 Gauss** et son inclinaison est de 0°, soit horizontale.

**Utilisation en champ magnétique statique : NORTH / CONSTANT POLE  
FREQUENCY + RHYTHM : OFF**

Le fait de dormir sur un pôle Nord magnétique permet de ne plus avoir à changer l'orientation du lit en fonction du champ magnétique terrestre.

**L'utilisateur dort comme s'il était placé sur le Pôle Nord magnétique.** Le voyant CONSTANT NORTH MAGNETIC POLE est allumé (Led bleue).

L'utilisation normale de **SOMNI PÔLE** dans l'hémisphère Nord consiste à augmenter la valeur de la composante verticale du champ magnétique terrestre du lieu : soit de créer un pôle Nord à la surface du lit.

**ATTENTION** : selon le sens du branchement du transducteur sur la prise de sortie, vous créez un pôle Nord ou un pôle Sud à la surface du lit.

Dans l'hémisphère Nord, un pôle Sud créé à la surface du lit diminuera la composante verticale du champ magnétique terrestre et pourra **même l'annuler** à une certaine distance.



Pour avoir un sommeil réparateur, l'appareil génère soit un champ statique constant en intensité (POLE NORD), soit un champ variable sur le rythme DELTA du Sommeil Lent Profond.

L'utilisation de **SOMNI PÔLE** chaque nuit peut permettre une **amélioration du bien-être** assez rapidement.

## Champ magnétique rythmé : RHYTHM ON

→ **Activer la touche RHYTHM sur ON** : l'indicateur NORTH POLE + RHYTHM (Led bleue) s'allume et le voyant SHOW MAGNETIC SIGNAL clignote au rythme du champ magnétique créé : - 4 Sec. -

**Appuyer ensuite sur +/-** afin de régler la durée de ce rythme - 6 Sec. - 8 Sec. - 11 Sec. - 16 Sec. - et à nouveau 4 Sec. - ...

*Illustration* ⑤

Le réglage le plus proche d'un rythme respiratoire est de 6 secondes. Il est donc recommandé d'utiliser ce réglage : SLEEP 6 SEC.

◆◆◆ Au bout d'une durée de l'ordre d'une heure, le champ magnétique créé redevient **statique constant** et le voyant CONSTANT NORTH MAGNETIC POLE s'allume ( Led bleue), la personne dort alors sur un pôle magnétique constant.

## Champ magnétique pulsé : FREQUENCY ON

→ **Activer la touche FREQUENCY sur ON** : l'indicateur NORTH POLE + RHYTHM AND/OR FREQUENCY s'allume et le voyant SHOW MAGNETIC SIGNAL clignote à la fréquence du champ magnétique créé. La première fréquence sélectionnée est : 1.2 Hz (DELTA).



◆ Ce réglage Delta, correspond à la fréquence des **ondes DELTA du Sommeil Lent Profond (stade III et IV)**.

La led verte de la colonne à gauche est alors allumée.

◆◆◆ L'utilisateur peut modifier la fréquence de cet oscillateur, sachant qu'une heure plus tard, le champ redeviendra constant (champ statique).

Pour modifier la fréquence du champ magnétique, appuyer sur +/- : Alpha 12 Hz - 25 Hz - 70 Hz - 290 Hz et à nouveau 1.2 Hz - ...

Illustration ⑥

→ **UTILISATION DE L'OPTION "HARMONIQUES"** : Activer la touche HARMONICS ON/ OFF ⑥

Les harmoniques sont des **fréquences musicales** (selon le clavier tempéré) créées à partir des fréquences sélectionnées,.

### AVERTISSEMENTS

L'appareil **SOMNI PÔLE** a été élaboré pour contribuer au bien-être et à la forme des utilisateurs. Nous ne revendiquons en aucun cas des effets thérapeutiques.

**Tout utilisateur souffrant de pathologies d'ordre médical doit se référer à son médecin traitant.**

**L'utilisation de SOMNI PÔLE dans les cas cités ci-après, ne doit évidemment pas suggérer ou imposer un arrêt pour tout traitement médical que l'utilisateur pourrait avoir.**

**Suivre toujours les conseils de votre médecin et ne jamais arrêter vos prises de médicaments ou vos traitements médicaux sans son accord et ceci même si vos douleurs ont disparu.**

### REMARQUE

Dans le cas d'une utilisation en champ variable, les porteurs d'appareils auditifs numériques doivent retirer leur appareil auditif.

### REGLAGE DES FREQUENCES

Par les champs magnétiques pulsés, on stimule les cellules, sans agresser l'organisme.

◆ **Le réglage à 1.2 Hertz** (ondes **Delta**) peut :

- diminuer les dérangements du sommeil,
- réduire la nervosité.
- améliorer l'hypertension.

Avec l'option harmoniques sont générées toutes les fréquences du sommeil – **Alpha, Thêta et Sigma** - ce qui peut :

- apporter un mieux-être pour le sommeil (sommeil réparateur).
- améliorer certaines maladies neurodégénératives.

**Si on appuie sur la touche située en haut à gauche**, le réglage devient **Thêta** (4 Hz ou 4 Hz à 8 Hz avec les harmoniques), ce qui peut :

- améliorer certaines maladies neurodégénératives,
- faciliter la méditation.

◆ **Un réglage à 12 Hertz** équivalent aux ondes **alpha** de l'activité de veille calme (stade 0 du sommeil), peut apporter un état de relaxation.

➔ Si la touche au milieu, à gauche de l'appareil "30 MIN. TO DELTA / THETA" est activée, la fréquence passera automatiquement de 12 Hz à 1.2 Hz ou 4 Hz au bout de 30 minutes, soit des **ondes alpha** aux **ondes Delta** ou **Thêta**.

Ce réglage peut :

- améliorer la migraine,
- diminuer les réactions allergiques.
- Faciliter la réparation des ligaments et des tendons.

◆ **Un réglage à 25 hertz** (ondes cérébrales **Bêta**) peut :

- diminuer la douleur causée par l'arthrose,
- soulager la douleur causée par l'inflammation des articulations (arthrite),
- diminuer l'affaiblissement du tissu osseux dû à la diminution du calcium (ostéoporose),
- favoriser la consolidation des os en cas de fracture osseuse,
- réduire les crises d'acouphène,
- favoriser la régénérescence de la peau dans le cas de petites plaies cutanées ou de légères blessures (cicatrisation),
- diminuer la cellulite,
- améliorer la circulation sanguine, y compris celle des petits vaisseaux sanguins.

◆ **Un réglage à 70 hertz** peut :

- améliorer les douleurs rhumatismales que suscitent les affections de l'appareil locomoteur et des tendons,
- alléger les névralgies au niveau du bras (brachialgie),
- diminuer les douleurs dans le cas de tendinites,
- améliorer la circulation sanguine des jambes,
- diminuer les varices des membres inférieurs,
- améliorer l'asthénie (affaiblissement de l'organisme),
- améliorer l'atrophie musculaire (affaiblissement de la masse musculaire),
- améliorer l'hypotension (réduction excessive de la circulation artérielle : mains et pieds froids),
- régénérer les tissus cutanés lésés tout en favorisant l'action antibactérienne,
- régénérer la peau dans le cas de brûlures en minimisant les cicatrices visibles.

◆ **Un réglage à 290 hertz** peut :

- améliorer les douleurs ci-dessus en cas de problèmes inflammatoires en particulier avec l'option harmoniques et le transducteur TRT304 (polyarthrites, tendinites).

➔ Si les deux touches FREQUENCY et RHYTHM sont activées, le voyant SHOW MAGNETIC SIGNAL indique toujours le champ magnétique créé. Le générateur crée un champ statique constant entrecoupé d'un champ magnétique variable (à utiliser durant la nuit car la durée du champ magnétique variable à la fréquence Delta est divisée par 2. Pour avoir un sommeil réparateur, la durée totale de Delta durant une nuit est de 100 minutes).

**Avec l'option harmoniques**, régler RHYTHM sur un rythme de 16 secondes (**HARMONIC SLEEP 16 sec.**) En procédant de cette manière, l'utilisateur **tout en ayant le cycle complet du champ variable**, utilisera alors **le champ statique constant pendant la moitié du temps**.

◆◆◆ Comme indiqué précédemment, au bout d'une durée de l'ordre d'une heure, le champ magnétique créé redevient automatiquement constant et le voyant CONSTANT NORTH MAGNETIC POLE s'allume (Led bleue).



L'intérêt de **SOMNI PÔLE** est de placer **le corps entier de l'utilisateur dans le champ magnétique créé** (en utilisant le transducteur TRP100 ou TRT304).

L'utilisation des champs magnétiques pulsés peut améliorer **l'élimination des toxines du corps** par le biais de l'eau. **Ne pas hésiter à boire un verre d'eau avant et après chaque séance.**

D'autre part, le champ magnétique généré par le transducteur principal TRP100 a une valeur équivalente au champ magnétique terrestre : ainsi à l'exception des contre-indications citées en page 3 de cette notice, son utilisation est absolument sans danger pour le corps humain.



## Variation de l'intensité du champ magnétique

→ Appuyer sur la touche +/- placée au dessus de l'indication INTENSITY, permet de régler l'intensité du champ magnétique, de 100% à 10% de sa valeur maximale (5 plages).

Illustration 7



◆ Indication **SLEEP** : réglage conseillé pour une utilisation sur l'ensemble de la nuit.  
Un réglage à 50% crée un champ magnétique dont la composante verticale ajoutée à celle du lieu d'utilisation, est équivalente à celle du **pôle Nord magnétique**..

◆ Les réglages inférieurs à 50% permettent de créer un champ magnétique dont la composante verticale ajoutée à celle du lieu d'utilisation, est de l'ordre de celle des pays situés au Nord de l'Europe.

## Réduction de l'intensité lumineuse

→ Activer la touche LIGHTS permet sans changer la valeur du champ magnétique, de réduire l'intensité de l'illumination de l'appareil afin de ne pas nuire au sommeil.

Illustration 8

## Protection

→ Si l'indicateur LOCKED s'allume en rouge, cela signifie que par mesure de sécurité, l'appareil s'est mis à l'arrêt.

Dans ce cas, le courant dans le transducteur est coupé et la led bleue SHOW MAGNETIC SIGNAL est éteinte d'une manière permanente.

Pour remettre en fonctionnement l'appareil, attendre 3 minutes puis appuyer sur la touche REBOOT.

Illustration 9

→ Si l'appareil n'émet aucune indication lumineuse, l'éteindre quelques secondes puis vérifier le branchement du transducteur. Rallumer ensuite l'appareil.

## MAINTENANCE / ENTRETIEN



### Risque de blessures

En cas de mise en PROTECTION de l'appareil, si le voyant LOCKED refuse de s'éteindre, vérifier que le branchement du transducteur sur la prise de sortie est correct. Si c'est le cas, faire dépanner l'appareil dans un service de maintenance.

Pour un changement de fusible, éteindre l'appareil et débrancher la fiche secteur avant d'effectuer ces travaux. Les fusibles F800mAT 250V sont situés sur la face arrière de l'appareil, en dessous de l'interrupteur.

## Nettoyage de l'appareil



### Attention

Ne jamais plonger l'appareil **SOMNI PÔLE** dans l'eau et ne pas utiliser de produits liquides détergents. En cas de salissures sur le transducteur ou l'appareil, nettoyez simplement avec un chiffon sec.

## CONSIGNES GENERALES

### Garantie

Les conditions de garantie en vigueur sont d'une durée de deux années après la date d'achat. Nous effectuons gratuitement la réparation d'éventuelles pannes sur l'appareil au cours de la durée de la garantie, si une erreur de matériaux ou de fabrication en sont la cause.

En cas de recours en garantie, il faut nous adresser l'ensemble complet de l'appareil et son bon d'achat.

### Service après-vente

Notre société se tient à votre entière disposition pour d'éventuelles questions ou problèmes.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension 230 V ~ 50 Hz / 120 V ~ 60 Hz pour USA

Fusible action retardée F800mAT 250V / F1.6AT pour USA

Puissance P nom 70 W

Câble d'alimentation H05-VV-F 3x0,75mm<sup>2</sup>

Champ magnétique Transducteur principal TRP100 : 0.12 Gauss à 1.2 Gauss (12 µT à 120 µT)

Sous réserve de modifications techniques

**JADE RECHERCHE**  
**32230 SAINT JUSTIN**  
FRANCE  
Tel/Fax : 33(0)5 62 08 24 97  
[Jade.recherche@orange.fr](mailto:Jade.recherche@orange.fr)

## CONSEILS D'UTILISATION DE SOMNI PÔLE POUR LA NUIT ( TRP100)

- Fonction Pôle Nord magnétique : champ statique (constant).
  - *Les touches FREQUENCY et RHYTHM sont désactivées.*
  - *Il est conseillé de régler l'intensité (INTENSITY) à 50 % (à l'aide la touche +/-).*
- Ondes DELTA :
  - *La touche FREQUENCY est activée : Delta 1,2 Hz (avec ou sans les harmoniques).*
  - *La touche RHYTHM peut être activée et réglée (à l'aide la touche +/-) sur 6 secondes pour Delta seul ou 16 secondes avec les harmoniques.*
  - *Il est conseillé de régler l'intensité (INTENSITY) à 50 %.*

Après une heure de champ DELTA, basculement automatique en fonction Pôle Nord magnétique.
- Ondes ALPHA puis DELTA : après 30 minutes de champ ALPHA, on a DELTA :
  - *La touche FREQUENCY est activée et réglée sur Alpha 12 Hz. ou Delta avec Harmoniques.*
  - *La touche RHYTHM peut être activée et réglée (à l'aide la touche +/-) sur 6 secondes pour Delta seul ou 16 secondes avec les harmoniques.*
  - *La touche 30 MIN. TO DELTA/THETA située à gauche de la façade est également activée.*
  - *Il est conseillé de régler l'intensité (INTENSITY) à 50 %.*

Après une heure, basculement automatique en fonction Pôle Nord magnétique.

## CONSEILS D'UTILISATION DE SOMNI PÔLE EN CHAMP PULSE (pages 7 et 8)

- Avec le Transducteur DrapTRP100 installée sous le sommier :
  - *La touche FREQUENCY est activée avec ou sans les harmoniques. La fréquence est réglée à l'aide de la touche +/-.*
  - *Il est conseillé de régler l'intensité (INTENSITY) à 100 % (à l'aide la touche +/-).*
- Avec le Transducteur CoussinTRS200 ou avec le Transducteur AmplifiéTRT304 (intensité du champ plus importante) en utilisation ponctuelle, il faut positionner le transducteur avec l'étiquette placée en haut de celui-ci afin de respecter le sens du champ magnétique terrestre :
  - *La touche FREQUENCY est activée avec ou sans les harmoniques. Fréquence réglée avec touche +/-.*
  - *A utiliser pendant 20mn première séance, puis augmenter si besoin. Boire abondamment.*

## REMARQUES

- Appuyer 2 fois sur la touche FREQUENCY ou la touche RHYTHM pour réinitialiser l'appareil après basculement automatique en fonction Pôle Nord magnétique, au bout d'une heure.
  - Si vous souhaitez utiliser une fréquence différente de Delta ou d'Alpha et revenir au bout de 30 minutes en ondes Delta pour vous endormir, vous pouvez activer la touche « 30 MIN. TO DELTA/THETA » et régler l'intensité sur 50 %.
  - Utilisé sur un fauteuil en champ constant, le transducteur second TRS200 peut vous aider à vous protéger des ondes électromagnétiques (WIFI, téléphone portable, micro-ondes, ..).
- IMPORTANT : suivez toujours les conseils de votre médecin et n'interrompez jamais vos prises de médicaments ou vos traitements médicaux sans son accord même si vos douleurs ont disparu.